



**LE MOTEUR DE  
VOTRE CONFIANCE**

# M3 CORPUS® – LE MOTEUR DE VOTRE CONFIANCE.

Une redoutable association entre un châssis et une assise.

Le M3 Corpus suit les mouvements naturels de votre corps, vous donnant une expérience de conduite stable, plus confortable, afin que vous puissiez profiter de votre journée au maximum!

Le M3 Corpus établit une nouvelle norme de qualité pour les fauteuils roulants électriques à roues motrices centrales. La combinaison des suspensions **Smooth**, du contrôle de direction et de l'assise Corpus offre une solution complète à vos besoins de mobilité.

Le système d'assise Corpus est entièrement personnalisable et prévu pour aider à réduire le risque que les utilisateurs développent des escarres. Avec la possibilité de combiner cinq fonctions d'assise électriques, couplées avec trois mémoires d'assise programmables, votre confort et votre bien-être sont assurés.

Nous offrons un large éventail d'accessoires vous permettant de rester assis et détendu plus longtemps dans votre fauteuil et ainsi profiter au maximum de votre journée.

Notre dernier manipulateur intègre BLUETOOTH® et infrarouge, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à votre téléphone mobile, contrôler votre tablette ou votre PC et même vous connecter à votre environnement \*, par exemple contrôler le téléviseur ou allumer ou éteindre les lumières.

\* Peut nécessiter un équipement supplémentaire dans votre maison, non fourni par Permobil.

## CARACTERISTIQUES



### Suspension **Smooth**

La suspension **Smooth** offre un confort, une stabilité et une adhérence exceptionnels sur les pentes et les obstacles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Son design simple et robuste, avec peu de pièces, vous assure fiabilité et facilité d'entretien.



### Active Height

Roulez avec votre assise liftée au maximum, à une vitesse de 0.6 mph et avec l'intégralité des suspensions. Ce que vous ne retrouverez pas sur les autres fauteuils roulants à 6 roues.

### Active Reach

Vous disposez de 20° de proclive\* à n'importe quel niveau d'élévation, y compris lifté au maximum, vous offrant une meilleure accessibilité au monde qui vous entoure.

\* Au-delà de 10°, nécessite un accessoire supplémentaire.

## AVANTAGES

### M3 Corpus – Révolutionne les fauteuils roulants électriques – une fois de plus

Depuis 50 ans, Permobil est à la pointe de la technologie des fauteuils roulants électriques. Avec notre Corpus M3, nous avons repensé totalement ce que pouvait faire un fauteuil avec roues motrices centrales.

Avec le M3 Corpus, nous nous assurons que nous apportons la meilleure solution pour nos utilisateurs. Nous comprenons qu'il est important que la conduite soit confortable, intuitive et que

les fauteuils soient programmables pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Nous offrons un niveau de stabilité inégal grâce à la combinaison de la base motrice, du système de suspensions et du support d'assise à trois points.

Cette stabilité nous a permis de déplacer l'assise Corpus vers l'avant, ce qui signifie moins d'encombrement devant vous, une conduite plus

intuitive, un meilleur accès à votre environnement et une plus grande indépendance.

Le système d'assise soutient parfaitement votre corps et garantit une position d'assise quotidienne confortable. Vous pouvez utiliser la bascule d'assise et l'inclinaison du dossier afin d'obtenir une position de relaxation, mais également pour décharger le poids du corps, réduisant ainsi les points de pressions.

## ACCESSOIRES

### Assise et positionnement Coussins d'assise ROHO®

- » QUADTRO SELECT®
- » CONTOUR SELECT®
- » HYBRID ELITE®
- » ERGO AIR®

### Accessoires Permobil Original

- » Appui-tête
- » Cale-tronc
- » Cale-cuisse
- » Appui-mollet
- » Cale-hanche
- » Support amputation

### Dispositifs d'aide à la direction et connectivité avec le joystick

- » Souris avec connexion BLUETOOTH – contrôle jusqu'à 4 dispositifs (PC et tablette, par exemple)
- » Connexion infrarouge vous permettant de contrôler votre environnement
- » Une gamme de commandes spéciales : mini-joystick, commande au menton

### Supports et accessoires divers

- » Supports pour téléphone et tablettes
- » Porte-gobelet ajustable
- » Pochette sous l'accoudoir
- » Sac à nécessaire médical
- » Porte-béquilles
- » Support pour oxygène
- » Porte-bagages

**Système d'assise Corpus®**

Offre une gamme de fonctions d'assise électriques avec de nombreux avantages cliniques.

**Dossier biomécanique.**

L'un des points les plus avantageux de l'assise Corpus est le mouvement exclusif de son dossier biomécanique. Il garantit un changement de position optimal afin de réduire les risques de cisaillement et assurer une position parfaite, permettant à votre corps de se détendre correctement.

**Élévation d'assise Active Height.**

Ne manquez plus aucune conversation. Conduire lifté à 12"m à 0.6 mph, avec l'intégralité des suspensions fonctionnelles. Il est actuellement le lift le plus performant sur un fauteuil à 6 roues.

**Un niveau de stabilité inégalé.**

Un design simple et robuste inspire une grande confiance.

**Vitesse maximale**  
de 6 mph.

**Personnalisez le fauteuil**  
avec votre couleur préférée.

**Connectivité.**

Les technologies BLUETOOTH® et infrarouge intégrées dans les manipulateurs permettent aux utilisateurs de contrôler jusqu'à 4 appareils en BLUETOOTH et de connecter à la maison leur téléphone, leur téléviseur – et même allumer les lumières. Connectez-vous à votre environnement !

Les fonctions de mémoire facilitent la répétition des positions de soulagement des points de pression et le mode de repositionnement indépendant (IRM).

Le système anti-vibration garantit une conduite douce et stable dans les lignes droites.

**Suspension Smooth** – système de suspension offrant une conduite confortable, les 6 roues sont en contact avec le sol permettant une motricité optimale quand vous roulez.





## CARACTÉRISTIQUES

Poids max. utilisateur	300 lbs
Vitesse max.	6 mph
Autonomie	13 mi*
Largeur totale châssis	24"
Longueur totale châssis / Roulettes anti-bascule incluses	35.5"
Rayon de giration	20.5"
Franchissement d'obstacles	3"
Type de batterie recommandé	Groupe 34, Groupe 24
Poids avec batteries	385 lbs avec Groupe 34 405 lbs avec Groupe 24
Électronique R-net	120 A
Hauteur d'assise	17.5", 18.5", 19.5"
Élévation électrique de l'assise	12"
Réglage électrique de l'inclinaison d'assise	0°–50° <i>postérieur</i> 5°, 10° & 20° <i>antérieur</i>

Réglage électrique du dossier	85°–120° ( <i>manuel</i> ) 85°–180° ( <i>électrique</i> )
Réglage électrique du repose-jambes	85°–170°
Hauteur de dossier	20", 23"–28" (par 1")
Profondeur d'assise	14"–22" (par 1")
Largeur d'assise	17"–23" (par 2")
Largeur d'accoudoir	10", 13", 16", 18"

\* L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un sol irrégulier ou pour une conduite avec franchissement fréquent de trottoirs.

## FONCTIONS ÉLECTRIQUES



Bascule d'assise avant/proclive



Bascule d'assise arrière



Élévateur d'assise/lift



Relève-jambes réglables en angle



Inclinaison de dossier


## COLORIS



SUNBURST ORANGE   RADIANT RED   POWER PINK   OCEAN BLUE   GALACTIC GREEN   MIDNIGHT BLACK

\*Options hydrographiques disponibles dans Mossy Oak, Carbon Fiber, et CDG Poly.

## REVÊTEMENT

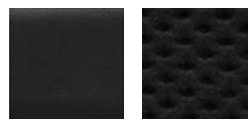

SIMILI CUIR   TISSU NOIR

Ces caractéristiques techniques dépendent de la configuration du fauteuil roulant. Pour toute information supplémentaire, reportez-vous au manuel d'utilisation qui peut être téléchargé depuis le site Internet Permobil ou contactez votre distributeur Permobil local.

# permobil